

MICROCATHETER

# TACTICS



Technique And Concept To Improve a Catheterization System

PLUS

**Technocrat**  
C o r p o r a t i o n

## TACTICS PLUS Products Features

### ○ 0.040inchのエクストララージルーメン

挿入するデバイスのフリクションを低減するため、従来製品の外径を維持し極限の内腔を実現しました。

### ○ 更なるユーティリティを持たせた中間カテーテル

挿入可能なマイクロカテーテルは10カテから18カテ(外径2.9Fr以下)、すべてのフローダイレクトマイクロカテーテルまで。また、ガイドワイヤーは0.038inchまで。

### ○ キンクレジスタンスを考慮した、ハイブリッドツインメッシュブレードを採用

従来品以上の耐キンク性と内腔保持を担保するため、ステンレス線とタングステン線を並列させたハイブリッドツインメッシュ構造のブレードデザインを採用しました。



### ○ 用途に応じたレングスバリエーション

有効長120cm、125cm、130cmは主に中間カテーテル(DAC)として、150cmはコアキシャル法施工時のインナーカテーテルや深部末梢血管選択時の造影目的など。

### ○ 多段階のシャフトトランジション

リニアなプッシュアビリティとスムーズなトラッカビリティが発揮できる、カテーテルシャフトのバランス設計に工夫をしました。

## TACTICS PLUS Specification

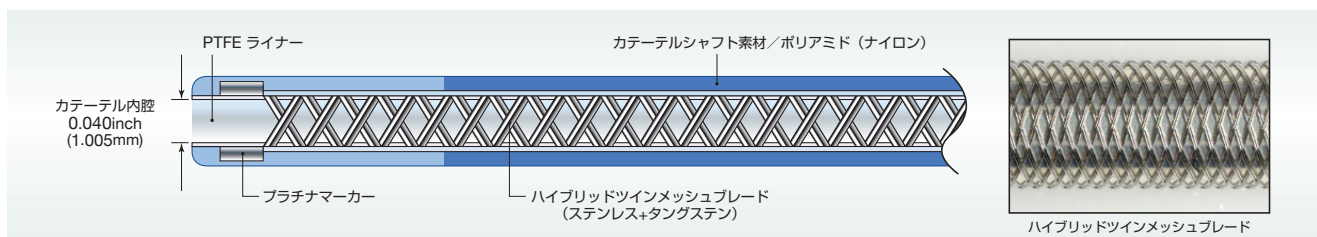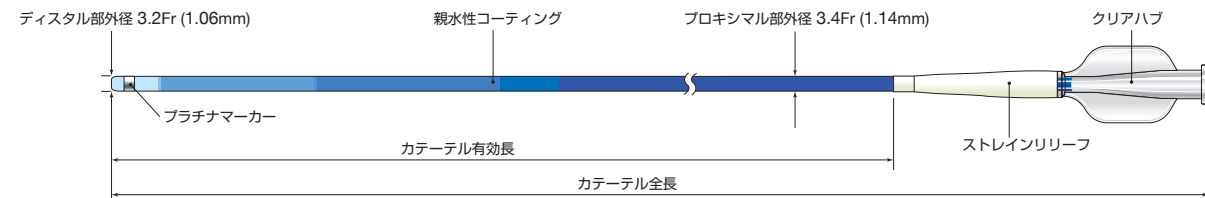

## TACTICS PLUS Lineup

カタログ No.	カテーテル有効長	カテーテル全長	デッドスペースボリューム	親水性コーティング長	プロキシマル部外径	ディスタル部外径	カテーテル内腔	推奨最大適合ガイドワイヤー	適合最小ガイドリングカテーテル内腔	挿入可能カテーテル外径	推奨最小シースサイズ
550-2200	120 cm	128 cm	1.10 cc	80cm	3.4Fr (1.14mm) (0.045inch)	3.2Fr (1.06mm) (0.042inch)	0.040inch (1.005mm)	0.038inch (0.97mm≦)	0.048inch	2.9Fr (0.97mm)	4Fr
550-2250	125 cm	133 cm	1.15 cc								
550-2300	130 cm	138 cm	1.20 cc								
*550-2400	140 cm	148 cm	1.30 cc								
550-2500	150 cm	158 cm	1.40 cc								

※印のつく製品は受注生産となります。詳細はお問い合わせください。

- ◆ 販売名: TCマイクロカテーテル
- ◆ 一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
- ◆ クラス分類: 高度管理医療機器(クラス4)
- ◆ 承認番号: 30200BZX00092000
- ◆ 特定保険医療材料請求分類  
血管造影用マイクロカテーテル/オーバーザワイヤー/造影能強化型(マイクロカテ・OZ)

製造販売元

株式会社テクノクラートコーポレーション

本社 〒486-0845 愛知県春日井市瑞穂通 1-186  
TEL 0568-37-1107 FAX 0568-37-1108  
<https://www.technocrat-corp.com>